



Guide d'utilisation
du contour d'oreille
Moda II™

Table des matières

Vos appareils auditifs Moda II™.....	1
Des solutions pratiques pour tous les jours	2
Profitez pleinement de vos appareils auditifs Moda II™	3
Utilisation du guide Moda II™	4
Ajuster vos appareils auditifs Moda II™ sur vos oreilles	5
Mettre en marche et arrêter vos appareils auditifs Moda II™	6
Une écoute sans larsen	7
Remplacement de la pile	8
Mode d'emploi	10
Dispositifs techniques pour malentendants	14
Entretien de vos appareils Moda II™	15
Nettoyage de vos appareils Moda II™	16
Mises en garde	19
Guide de dépannage	22

Vos appareils auditifs Moda II™

Audioprothésiste : _____

Téléphone : _____

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Piles de remplacement : ☐ Taille 312

Garantie : _____

Le programme 1 est le programme automatique
(Disponible sur Yuu, Next 16 et Next 8 uniquement)

Le programme 2 est le programme manuel pour : _____

Le programme 3 est le programme manuel pour : _____

Le programme 4 est le programme manuel pour : _____

Date de l'achat : _____

Des solutions pratiques pour tous les jours

Félicitations ! Vous avez choisi le nouveau contour Moda II™. Depuis 40 ans, Unitron Hearing s'engage à améliorer la vie des personnes concernées par une perte auditive. Unitron Hearing propose des solutions d'écoute de grande qualité et développe de nouvelles fonctions, destinées à répondre aux exigences de confort des utilisateurs.


Moda II est un contour ultra-compact, discret et agréable à porter. En plus d'être 37% plus petit qu'un contour traditionnel, Moda II se caractérise par des technologies haut-de-gamme qui lui confèrent une qualité de son exceptionnelle dans les environnements sonores quotidiens. Votre audioprothésiste peut vous renseigner sur l'appareil auditif Moda II que vous portez et vous informer sur ses caractéristiques adaptatives.

Profitez pleinement de vos appareils auditifs Moda II™


Il vous faudra quelque temps pour vous adapter à votre nouvel appareil auditif. Au début, il est important que vous ôtiez votre appareil lorsqu'il commence à vous gêner. Vous pourrez augmenter progressivement leur durée d'utilisation. En revanche, une fois que vous serez habitué à votre appareil, vous devrez le porter tous les jours. En effet, si vous ne suivez pas cette consigne, vous ne pourrez pas vous y habituer et vous ne pourrez pas profiter du confort qu'il vous apportera. Plus rapidement vous vous habituerez aux sons de tous les jours qui vous environnent, moins vous remarquerez que vous portez un appareil auditif.

Utilisation du guide Moda II™

Consultez la table des matières pour une liste complète des sujets abordés dans ce guide. Les schémas ci-dessous vous permettent d'identifier les différents composants de vos appareils auditifs Moda II.

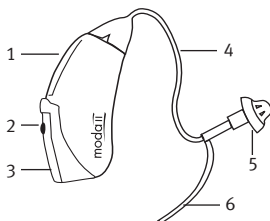

☐ Moda II avec tube fin et dôme

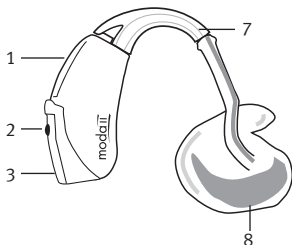

☐ Moda II avec coude auriculaire et embout auriculaire

Légende

- 1 Microphone et protège-microphone
- 2 Bouton de programmation ou potentiomètre (selon votre appareillage personnalisé)
- 3 Tiroir pile/bouton marche / arrêt
- 4 Tube fin
- 5 Dôme
- 6 Pièce de rétention
- 7 Coude auriculaire
- 8 Embout auriculaire

Ajuster vos appareils auditifs Moda II™ sur vos oreilles

Vos appareils auditifs Moda II peuvent comporter un code couleur rouge pour l'oreille droite et un code couleur bleu pour l'oreille gauche. Cet indicateur de couleur est situé à l'intérieur du couvercle du compartiment à pile et il prend la forme d'un petit point coloré.

Moda II avec dômes

1. Insérez le dôme avec précaution dans votre oreille. Le dôme doit être agréable à porter et bien ajusté à votre oreille. Le tube fin doit affleurer et non dépasser de l'oreille.
2. Placez Moda II au-dessus de votre oreille.
3. Placez la pièce de rétention dans votre oreille de façon à ce qu'elle repose au bas de l'ouverture de votre canal auriculaire.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre oreille si vous portez deux appareils auditifs.



Moda II avec embout auriculaire

1. Insérez doucement l'embout auriculaire dans votre

oreille. Il doit être confortable et bien ajusté.

2. Placez l'appareil auditif au-dessus de votre oreille.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre oreille si vous portez deux appareils auditifs.


Mettre en marche et arrêter vos appareils auditifs Moda II™


Le tiroir pile de vos appareils auditifs est doté d'une porte à trois positions, qui sert d'interrupteur marche/arrêt et permet en outre d'accéder à la pile.

Pour mettre l'appareil en marche, fermez complètement le tiroir pile. *Noter: si la mise en marche retardée est activée, vos appareils ne fonctionneront qu'au bout de 10 à 15 secondes après avoir refermé le tiroir pile.*

Pour arrêter l'appareil, ouvrez partiellement le tiroir pile. Cette position permet également d'évacuer l'excès d'humidité du compartiment à pile.

Pour remplacer la pile de l'appareil, ouvrez complètement le tiroir pile pour accéder à la pile.

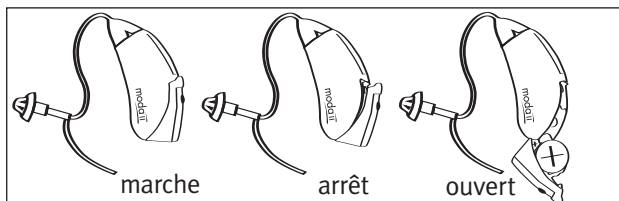

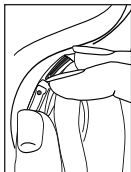

Remarque : Lorsque vous désirez mettre en marche ou arrêter votre appareil, saisissez le haut et le bas de l'appareil entre le majeur et le pouce. Ouvrez et fermez le couvercle de pile à l'aide de votre index.


Une écoute sans larsen

Vos appareils auditifs Moda II ont une fonction de mise en marche retardée qui peut être activée par votre audioprothésiste. Si le délai de mise en marche est activé, vos appareils auditifs ne s'allumeront qu'au bout de 10 à 15 secondes après la fermeture totale du couvercle du compartiment à pile. A chaque fois que vous remettrez vos appareils en marche la fonction de mise en marche retardée s'activera. Ceci vous permet de mettre vos appareils sans qu'ils ne sifflent.

Si vous portez déjà des appareils auditifs, vous avez peut-être remarqué qu'ils sifflent lorsque vous parlez ou téléphonez, ou encore lorsque vous mastiquez ou embrassez quelqu'un. La technologie anti Larsen de Moda II élimine ce sifflement inconfortable.

Remplacement de la pile

1. Faites pivoter doucement le tiroir pile avec l'ongle.
2. Saisissez la pile entre le pouce et l'index et retirez-la.
3. Insérez la nouvelle pile dans le tiroir pile avec le signe plus (+) de la pile faisant face au signe plus (+) sur le rebord du tiroir pile, pour que le tiroir pile ferme bien.

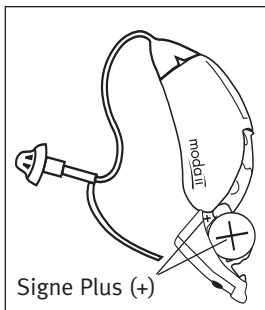

Remarque : Si la pile n'est pas insérée correctement, le tiroir pile ne fermera pas.

4. Fermez le tiroir pile.

Avertisseur de pile faible

Deux longs bips sonores indiquent que les piles de vos appareils auditifs sont presque épuisées. Cet avertissement sera répété à intervalles de 30 minutes environ, jusqu'à ce que vous changiez les piles ou que celles-ci s'épuisent. Après le premier signal, il se peut que vous remarquiez une réduction de la qualité du son. Cela est normal et peut être corrigé en remplaçant les piles par des nouvelles. Si vous le préférez, votre audioprothésiste peut aussi régler le ton et le volume du bip de programmation, ou encore le supprimer.

Entretien des piles

- Jetez toujours les piles en lieu sûr.
- Pour prolonger la durée des piles, n'oubliez pas d'arrêter vos appareils auditifs lorsque vous ne vous en servez pas.
- Lorsque vous n'utilisez pas vos appareils auditifs, retirez les piles et gardez le tiroir pile ouvert. Cela permettra à l'humidité interne de s'évaporer.

Mises en garde

- Ne laissez jamais vos appareils auditifs ou vos piles à la portée de jeunes enfants ou d'animaux.
- Ne mettez jamais vos appareils auditifs ou vos piles dans votre bouche. Si un appareil auditif ou une pile est avalé, appelez votre médecin immédiatement.

Mode d'emploi

Changement des programmes de vos appareils auditifs Moda II™

Vos appareils Moda II peuvent avoir un programme automatique, et jusqu'à trois programmes manuels supplémentaires. Le programme automatique de Moda II traitera la plupart de vos besoins d'écoute en s'ajustant aux différentes ambiances sonores sans intervention manuelle de votre part. Jusqu'à trois programmes manuels peuvent être réglés sur mesure par votre audioprothésiste afin de satisfaire vos besoins d'écoute particuliers.

Vos appareils auditifs peuvent être équipés d'un bouton servant à passer d'un programme à l'autre ou à ajuster le volume. Ce bouton peut également être désactivé par votre audioprothésiste. Si votre bouton de commande est activé, vous pouvez passer à un nouveau programme chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Signaux sonores des programmes

Un signal sonore vous indique le programme sélectionné (p. ex. un bip pour le programme 1, deux bips pour le

Programme 1 (programme automatique)		1 bip
Programme 2 (bruits de groupe/réceptions)		2 bips
Programme 3 (Easy-t/téléphone)		3 bips
Programme 4 (musique)		4 bips

programme 2, etc.). Si vous le préférez, votre audioprothésiste peut régler le ton et le volume du bip de programmation ou encore le supprimer.

Réglage du volume

Le volume de vos appareils auditifs s'ajuste automatiquement en fonction des sons (forts ou faibles) présents dans votre environnement. Par défaut, vos appareils auditifs sont réglés sur votre volume idéal. Votre volume idéal est indiqué par 1 bip. Si vous possédez un bouton ou un contrôle manuel de volume, vous pouvez ajuster le volume plus précisément.

Signaux sonores du volume

Lorsque vous changerez le volume, vos appareils auditifs émettront des bips sonores. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour en apprendre davantage sur les différents bips sonores du volume.

Réglage du volume	Bip
Idéal	 1 bip
Le volume a été augmenté	 1 bip + 1 bip aigu
Le volume a été baissé	 1 bip + 1 bip grave

Au besoin, votre audioprothésiste peut vous aider à identifier les différents réglages de volume. Si vous le préférez, votre audioprothésiste peut régler le ton et le volume du bip ou encore le supprimer.

L'écoute en présence de vent

La gestion du bruit du vent de Moda II s'enclenchera automatiquement selon l'intensité du vent (modérée ou élevée). Lorsque le gestionnaire de bruit du vent est déclenché, les sons tels que la parole peuvent être assourdis puisque le système agit pour réduire le bruit intense causé par le vent. Lorsque vous avez quitté l'ambiance venteuse, le gestionnaire de bruit du vent devient inactif, et les sons désirables comme la parole, redeviennent plus forts.

Ecoute dans des environnements tranquilles et bruyants

Votre appareil auditif numérique Moda II possède un système de microphones directionnels pour répondre à vos besoins d'écoute dans différents environnements. Le système directionnel se concentre sur les sons émis devant vous (c.-à-d. la parole), tout en réduisant le bruit autour de vous. Votre Moda II peut disposer d'un système de microphones directionnels, qui lui permet de s'ajuster automatiquement aux changements de niveau du bruit et de détecter les sources de bruit en mouvement. Votre audioprothésiste vous dira de quelle façon votre système directionnel a été personnalisé en fonction de vos préférences et pour quels programmes d'écoute les microphones directionnels sont activés.

De plus, les appareils auditifs Moda II emploient la technologie antiShock qui identifie et minimise les bruits

impulsifs soudains que beaucoup d'utilisateurs d'appareils auditifs trouvent irritants, comme les portes qui claquent et de la vaisselle qui s'entrechoque. Cette technologie est conçue pour augmenter le confort d'écoute lors de situations d'écoute défavorables sans qu'il n'y ait d'impact sur la qualité sonore ou sur votre capacité à comprendre les conversations.

Remplacement des protège-micros

Vos appareils auditifs Moda II intègrent un protège microphones qui protège les micros de la saleté et des poussières. Si les protège-micros s'encrassent, la qualité sonore de vos appareils en sera réduite. Il est conseillé de faire remplacer les protège-micros par votre audioprothésiste tous les trois mois environ, afin d'assurer une qualité sonore optimale.

Utilisation de l'appareil Moda II™ avec le téléphone

Moda II vous offre la possibilité, selon votre type de perte auditive, la taille du conduit et le style de l'appareil auditif, de supprimer l'effet Larsen lors de l'utilisation d'un téléphone sans que vous ayez à changer de programme. Lorsque le téléphone sonne, décrochez-le et placez-le près du microphone de votre appareil auditif. Lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire, vous pouvez parfois entendre des interférences, comme des grésillements, des bourdonnements ou des signaux sonores. Le cas échéant, augmentez la distance entre votre appareil auditif et le récepteur du téléphone.

Dispositifs techniques pour malentendants

L'écoute dans les lieux publics

La bobine téléphonique de Moda II contribue aussi à votre écoute dans des lieux publics équipés de dispositifs d'amplification sonore compatibles avec les bobines téléphoniques, par exemple un système de boucle magnétique. Si vos appareils auditifs ne fonctionnent pas bien lorsque la bobine téléphonique est en marche, il se pourrait que le système de boucle magnétique ne fonctionne pas, ou que vous soyez dans une zone où il n'y a pas de réception. Essayez ailleurs dans cette même boucle, ou remplacez l'appareil auditif à la position microphone en vous rapprochant autant que possible de la personne qui parle.

Entretien de vos appareils Moda II™

- Ouvrez le tiroir de pile lorsque vous n'utilisez pas vos appareils.
- Retirez toujours vos appareils auditifs lorsque vous utilisez des produits coiffants. Les appareils auditifs pourraient se boucher et cesser de bien fonctionner.
- Ne portez pas vos appareils auditifs dans le bain ou sous la douche et ne les immergez pas dans l'eau.
- Si vous mouillez vos appareils auditifs, n'essayez pas de les sécher en les plaçant dans un four conventionnel ou dans un four à micro-ondes. N'ajustez pas les contrôles. Ouvrez immédiatement les tiroirs pile et laissez vos appareils auditifs sécher naturellement pendant 24 heures.
- Protégez votre appareil auditif contre la chaleur excessive (sèche-cheveux, boîte à gants, tableau de bord).
- Vous pouvez contribuer à prévenir la corrosion en utilisant régulièrement un déshumidificateur, par exemple le nécessaire Dri-Aid. Consultez votre audioprothésiste pour plus d'informations.
- Évitez de faire tomber vos appareils auditifs ou de les choquer contre des surfaces dures.

Nettoyage de vos appareils Moda II™


Le cérumen est une matière naturelle. Une étape importante de vos habitudes quotidiennes de nettoyage et d'entretien sera de veiller à ce que vos appareils auditifs et embouts auriculaires ne soient pas endommagés par le cérumen.

- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer vos appareils auditifs, embouts auriculaires ou dômes.
- N'insérez pas d'instrument pointu pour déloger le cérumen, car vous pourriez endommager vos appareils auditifs.
- Faites remplacer les tubes fins et les dômes par votre audioprothésiste tous les trois à six mois environ ou lorsqu'ils durcissent ou deviennent faibles.
- Nettoyez les dômes quotidiennement avec un chiffon humide.
- Nettoyez régulièrement les tubes fins à l'aide de la tige de nettoyage fournie lorsque vous constatez que des poussières commencent à s'accumuler à l'intérieur et autour des tubes.

Nettoyage des embouts auriculaires et des dômes

Moda II avec tubes fins et dômes

Veillez à ce que les tubes fins et les dômes soient exempts de cérumen et d'humidité.

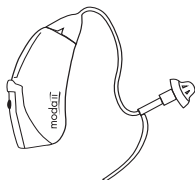

Nettoyage des tubes fins et des dômes :

1. Tenez le tube fin dans une main et l'appareil auditif dans l'autre.
2. Tournez le dessus du tube fin et détachez-le de l'appareil auditif.
3. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du tube fin et du dôme.
4. Insérez doucement la tige noire fournie avec le kit dans l'extrémité du tube fixée à l'appareil et poussez la tige le long du tube jusqu'à ce qu'elle sorte par le dôme.




Remarque : Les tubes fins et les dômes ne doivent jamais être rincés ou immergés, car des gouttes d'eau pourraient s'y introduire et bloquer le passage du son ou endommager les composants électriques de l'appareil.

5. Une fois le tube fin nettoyé, rattachiez-le en poussant doucement l'appareil auditif sur le tube.

Moda II avec coude et embout auriculaire

Si vos appareils auditifs disposent de coudes auriculaires (consultez la section « Utilisation du guide Moda II »), votre audioprothésiste vous a installé des embouts auriculaires personnalisés (consultez la section « Utilisation du guide Moda II »). Les embouts auriculaires

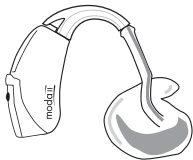

amplifient le son des appareils auditifs et l'envoient aux oreilles. Si des sons amplifiés s'échappent de votre oreille, il se peut que vous entendiez un sifflement.

Assurez-vous que les embouts sont toujours propres et exempts de cérumen et d'humidité. N'utilisez pas d'alcool pour les nettoyer. Si l'extrémité des embouts est obstruée, enlevez le dépôt à l'aide de la boucle à cérumen fournie avec votre appareil auditif, ou encore à l'aide d'un cure-pipe. Si votre médecin vous a prescrit des gouttes pour les oreilles, nettoyez l'humidité qui se serait introduite dans les embouts auriculaires ou le tube, pour en prévenir l'obturation.

Nettoyage des embouts auriculaires

Si les embouts auriculaires sont fixés à un coude et qu'ils doivent être mieux nettoyés, déconnectez le tube en plastique du coude auriculaire des appareils auditifs. Lavez seulement les embouts auriculaires à l'eau chaude et au savon doux. Rincez-les ensuite à l'eau froide et laissez-les sécher jusqu'au lendemain. Assurez-vous que les tubes des embouts auriculaires sont secs avant de les reconnecter aux coudes de vos appareils auditifs.

Mises en garde

- Les appareils auditifs doivent être utilisés uniquement tel que votre médecin ou votre audioprothésiste vous l'a recommandé.
- Les appareils auditifs ne rendront pas l'audition normale et ne préviendront pas ou n'amélioreront pas une déficience auditive due à des conditions organiques.
- Les appareils auditifs ne doivent pas être utilisés dans une zone où il y a danger d'explosion.
- Il est peu probable que vous constatiez une réaction allergique à vos appareils auditifs. Toutefois, en cas de démangeaison, de rougeur, de douleur, d'inflammation ou de sensation de brûlure autour ou à l'intérieur de l'oreille, veuillez en informer votre audioprothésiste et en parler à votre médecin.
- Dans l'éventualité improbable où des pièces resteraient dans votre conduit auditif après le retrait de l'appareil auditif, contactez immédiatement un médecin.
- Retirez vos appareils auditifs lors d'examens médicaux effectués à l'aide d'appareils de radiodiagnostic (scanner) ou pour tout autre examen électromagnétique.
- Prenez des précautions particulières lorsque vous portez des appareils auditifs dans une ambiance où le niveau de pression sonore maximum dépasse 132 décibels, car vous pourriez risquer de compromettre votre ouïe résiduelle. Consultez votre audioprothésiste

pour vérifier que le niveau de sortie maximum de vos appareils auditifs convient à votre degré de perte auditive.

Remarque destinée à l'audioprothésiste :

- Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients avec des tympan perforés, des caisses de tympan exposées ou des conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous conseillons d'utiliser un embout auriculaire.

Précautions

- Le port d'appareils auditifs n'est qu'une étape de réadaptation. Des exercices d'écoute et de lecture labiale peuvent aussi être nécessaires.
- Dans la plupart des cas, l'utilisation d'appareils auditifs ne procurera pas d'avantage significatif si elle n'est qu'occasionnelle. Une fois habitué à vos appareils auditifs, portez-les chaque jour, toute la journée.
- Vos appareils auditifs sont fabriqués à partir des composants les plus modernes, afin de vous offrir la meilleure qualité sonore possible dans toutes les ambiances d'écoute. Toutefois, certains appareils de communication, comme les téléphones cellulaires numériques, peuvent créer une interférence (bourdonnement) dans les appareils auditifs. Si vous constatez qu'un téléphone cellulaire situé à proximité entraîne une interférence, vous pouvez la réduire de

plusieurs façons : passez à un autre programme dans vos appareils auditifs, tournez la tête dans une direction différente ou localisez le téléphone cellulaire et faites en sorte de vous en éloigner.

Identification

Le numéro de série et l'année de fabrication sont indiqués à l'intérieur du tiroir pile.

Guide de dépannage

SYMPTÔME

SOLUTION POSSIBLE

Aucun son

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Pas en marche• Pile faible ou à plat• Mauvais contact de la pile• Pile à l'envers• Embouts auriculaires/ tubes fins/dômes obstrués par du cérumen• Protège-micro bouché | <ul style="list-style-type: none">• Mettre en marche• Remplacer la pile• Consulter votre audioprothésiste• Insérer la pile avec le signe plus (+) vers le haut• Nettoyez les tubes fins et les dômes. Consultez la section « Nettoyage des tubes fins et des dômes ».• Consulter votre audioprothésiste |
|--|--|

Volume insuffisant

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Volume bas• Pile faible• Embouts auriculaires/ tubes fins/dômes mal insérés• Changement dans l'audition• Embouts auriculaires/ tubes fins/dômes obstrués par du cérumen• Protège-micro bouché | <ul style="list-style-type: none">• Augmenter le volume; consulter un audio-prothésiste pour les modèles sans contrôle de volume manuel, ou si le problème persiste.• Remplacer la pile• Reportez-vous à la section « Mise en place de Moda II sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place.• Consulter votre audioprothésiste• Nettoyez les tubes fins et les dômes. Consultez la section « Nettoyage des tubes fins et des dômes ».• Consulter votre audioprothésiste |
|--|--|

SYMPTÔME	SOLUTION POSSIBLE
Intermittence	
• Pile faible • Contact de pile sale	• Remplacer la pile • Consulter votre audioprothésiste
Deux bips longs	
• Pile faible	• Remplacer la pile
Sifflement	
• Embouts auriculaires/tubes fins/dômes mal insérés • Main/vêtement près de l'oreille • Embouts auriculaires/tubes fins/dômes mal ajustés	• Reportez-vous à la section « Mise en place de Moda II sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place. • Éloigner la main/le vêtement de l'oreille • Consulter votre audioprothésiste
Manque de clarté, distortion	
• Embouts auriculaires/tubes fins/dômes mal ajustés • Embouts auriculaires/tubes fins/dômes obstrués par du cérumen • Pile faible • Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste. • Nettoyez les tubes fins et les dômes. Consultez la section « Nettoyage des tubes fins et des dômes ». • Remplacer la pile • Consulter votre audioprothésiste
Les embouts auriculaires/tubes fins/dômes tombent de l'oreille	
• Embouts auriculaires/tubes fins/dômes mal ajustés • Embouts auriculaires/tubes fins/dômes mal insérés	• Consulter votre audioprothésiste • Reportez-vous à la section « Mise en place de Moda II sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place.

SYMPTÔME

SOLUTION POSSIBLE

Faible au téléphone

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Téléphone mal positionné | • Déplacer le téléphone sur l'oreille pour obtenir un signal plus net. Consultez la section « Utilisation de Moda II avec un téléphone ». |
| • L'appareil exige un réglage | • Consulter votre audioprothésiste. |

Pour tout autre problème ne figurant pas dans ce guide, prenez contact avec votre audioprothésiste. Si vous êtes à la recherche d'un audioprothésiste, veuillez prendre contact avec l'agence Unitron Hearing la plus proche, dont les coordonnées figurent au dos de ce livret.

DISTRIBUTEURS UNITRON HEARING

CORPORATE OFFICE/INTERNATIONAL

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

AUSTRALIA

Level 2, Norwest Quay, 21 Solent
Circuit, Baulkham Hills, NSW,
NSW 2153

BELGIUM

Baron de Vironlaan, 60
b-1700 Dilbeek

CANADA

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1

CHINA

No. 200 Suhong Road, Export
Processing Zone 4D, Suzhou
Industrial Park 215021

DENMARK

Nitivej 10, DK-2000 Frederiksberg

EUROPEAN REPRESENTATIVE

Daimlerstrasse 22, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

FRANCE

5, rue Maryse Bastié - BP 15
69671 Bron Cedex, France

NETHERLANDS

Archimedesbaan 19, P.O. Box 1214,
3430 BE Nieuwegein

NEW ZEALAND

10/215 Rosedale Rd., M277 Private Bag,
300987, Albany, Auckland

NORWAY

Brugata 14 0186
Oslo, Norway

SOUTH AFRICA

First Floor – East Block, Pineslopes Office
Park, Cnr The Straight & Witkoppen
Roads, Fourways, Johannesburg 2194

SWEDEN

Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm, Sweden

UNITED KINGDOM

St. George House, Cygnet Court,
Centre Park, Warrington, Cheshire
WA1 1PD

U.S.A.

Suite A, 2300 Berkshire Lane North,
Plymouth, MN 55441

FABRICANT

UNITRON HEARING LTD.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada





www.unitronhearing.fr

DISTRIBUTEUR